

BJ-EX41 Ventilador SHX

Manual de Instrucciones



 **BJ Live!**
smart solutions that suit you



BJ-EX41 Ventilador SHX

Manual de Instrucciones

1_componentes de Pompas SHX



Ventilador SHX



BJ-234 BJ Enabler Socket+

2_Configuración de Ventilador SHX y Enabler Socket+

Desembalar el producto convenientemente



Por favor leer todo el manual para familiarizarse con las características del dispositivo antes de su primer uso.

1.1_ Contenido

Desempaquetar los productos de sus cajas y comprobar el contenido. Conjuntamente con el Ventilador SHX debe haber un manual de uso, en otra caja debe haber un enabler socket+ con su manual de instrucciones. Se recomienda guardar las cajas mientras dure el periodo de garantía por si fuera necesario reutilizarlo de nuevo. En caso de querer desechar el empaquetado, hacerlo de forma responsable.

Si encuentra cualquier desperfecto o falta de material al desembalar, por favor contactar con BJ Adaptaciones +34(93)2850437 para asistencia. Cualquier avería o rotura producida durante el transporte deberá ser notificada dentro de los tres días siguientes a su recepción.

El Ventilador solo deberá usarse en lugares donde exista una toma de alimentación.




1.2_ Especificaciones de Ventilador SHX

Alimentación 240V(AC) 50Hz a 3V(DC)

2_ Instrucciones de uso

Las pompas SHX están listas para su uso por lo que únicamente es necesario conectar el alimentador y éste a su vez al socket plus+ por lo que ya podrá usarse con el sistema SHX.

La configuración del socket + para el uso con el software BJ control SHX debe ser:

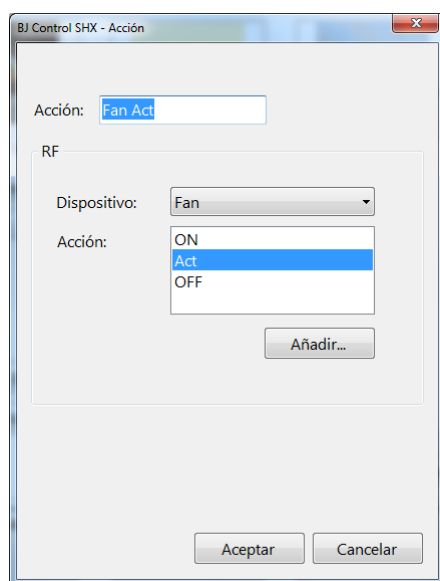

Act código 28
On código 74
Off código 58

3_ Limpieza y mantenimiento

Limpiar la superficie del Ventilador SHX de forma regular para mantener un buen funcionamiento del dispositivo. Para su limpieza debe desconectarse de la toma de alimentación. Limpiar utilizando agua jabonosa y un paño suave (escurrido). No utilizar nunca productos químicos ni abrasivos para la limpieza. Secar concienzudamente la superficie y no alimentar hasta pasada una hora.



4_ Inspecciones periódicas



El producto debe usarse siempre bajo supervisión adulta.

Se recomienda una inspección periódica de los dispositivos, en caso de detectar cualquier anomalía ponerse en contacto inmediatamente con BJ Adaptaciones +34(93)2850437 para asistencia.

5_ Pautas de seguridad

El uso correcto y supervisado de este equipo garantizará que pueda usarse durante mucho tiempo.

El ventilador SHX está diseñado para crear un efecto sensitivo, no está diseñado para el uso con directo con usuarios.

Importante

Nunca dejar a los usuarios sin supervisión adulta mientras utilizan este producto. Válido para el uso en terapias con varios usuarios simultáneamente.

 **BJ Live!**
smart solutions that suit you

